


KUNDENSPEZIFISCH KONFIGURIERBARES SYSTEM FÜR FLUID- UND GASPROBENNAHME

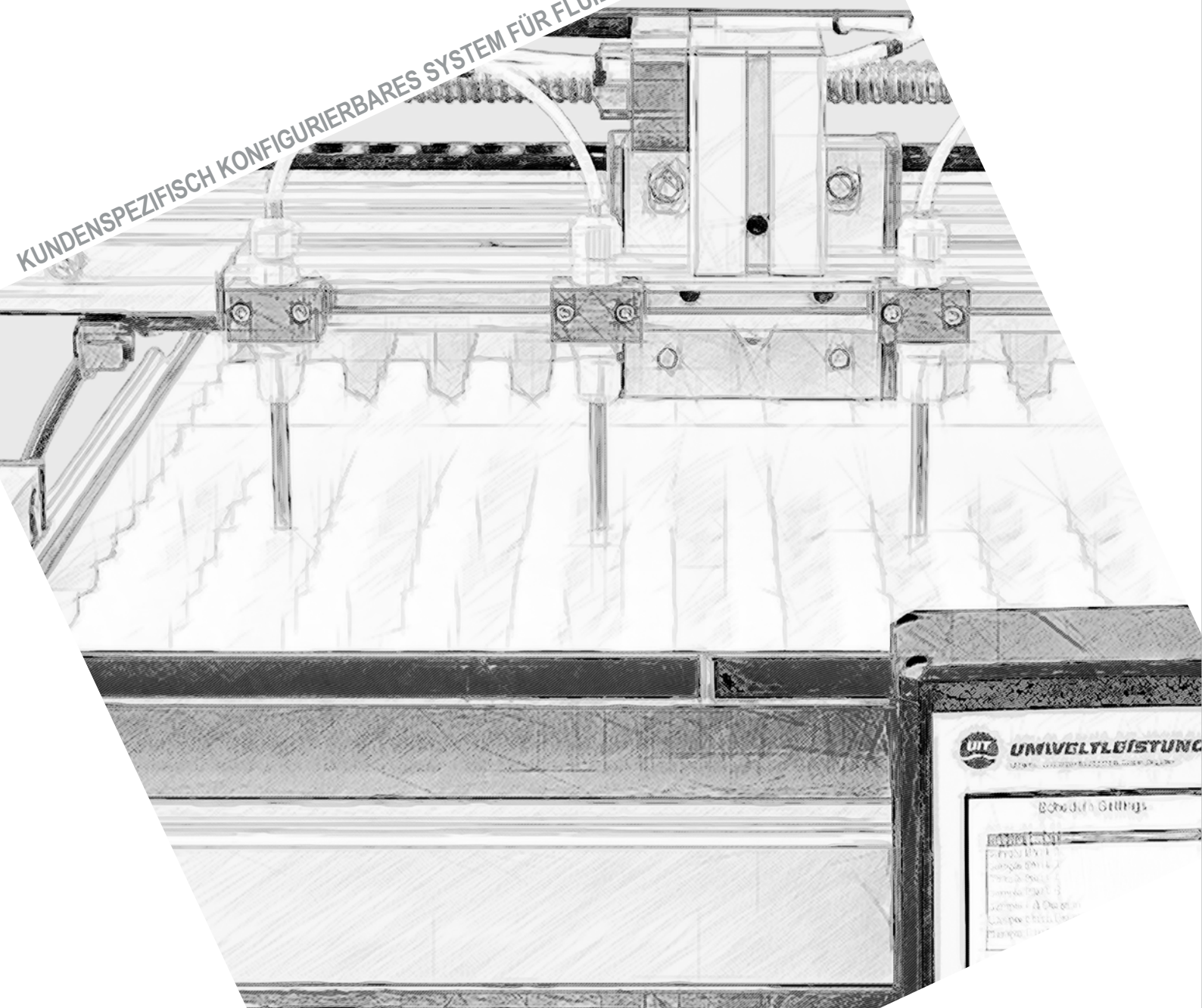

Autosampler AS2

PRODUKTINFORMATION

Autosampler AS2 - kundenspezifisch konfigurierbares System

AUTOSAMPLER AS2-W


für Fluidprobenahme



Autosampler AS2-W

AUTOSAMPLER AS2-G

für Gasprobenahme

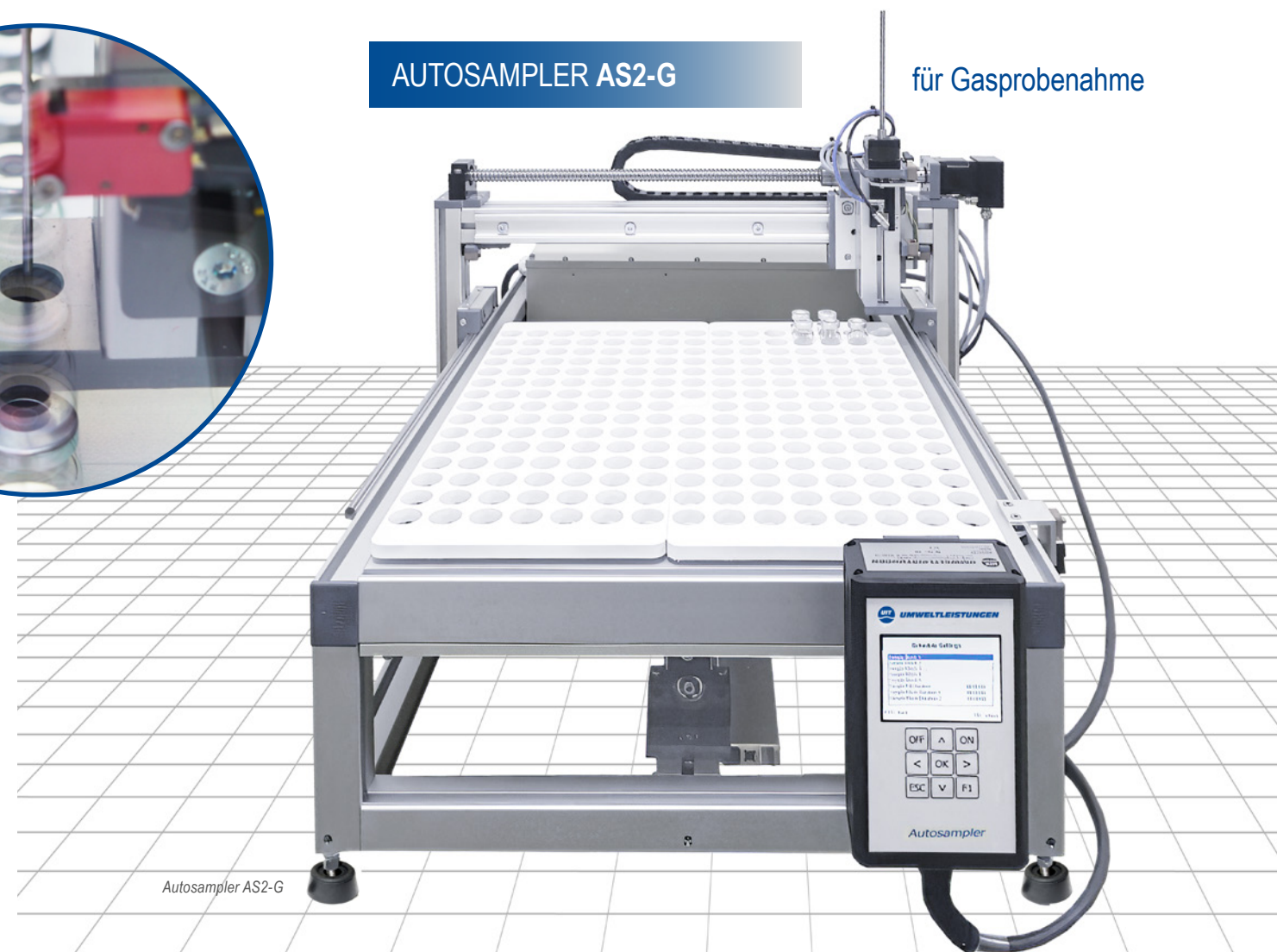

Autosampler AS2-G

TECHNISCHE DATEN AUTOSAMPLER AS2-W

- Ein- oder Mehrkanalsamplingsystem
- Anzahl der maximalen Kanäle: 4
- Abmessungen: Breite 680 mm; Länge 500 mm; Höhe 440 mm
- Spannungsversorgung 110...230 VAC

Probenahmetisch/ Probenahmegefäße

- Probenahmetischgröße: 440x430 mm
- Probenahmegefäße: Material Kunststoff; Glas
- Verfügbare Volumen: 50 ml; 100 ml; 250 ml – andere Größen auf Anfrage
- Anzahl der platzierbaren Gefäße z.B. Volumen 50 ml: 132 Stück + zusätzliches Abfallgefäß für die Ableitung des Spülfluids

Steuerung/ Ventiltechnik

- Parametrierbarer synchroner und asynchroner Probenahmeprozess
- Möglichkeit der Definition von Zeitplänen für den Probenahmeprozess
- Steuerung kann zusätzlich 4 Stück Ventile bedienen – damit ist das Ausschleusen einer Fluidprobe aus einem Prozess möglich

Anaerobe Probenahme

- Einkanalsystem kann optional so gestaltet werden, dass eine Probenahme unter anaeroben Bedingungen möglich ist –erfordert Nadeleinstichautomatik

TECHNISCHE DATEN AUTOSAMPLER AS2-G

- Einkanalsamplingsystem mit Doppelnadel und Nadeleinstichautomatik
- Abmessungen: Breite 680 mm; Länge 500 mm; Höhe 440 mm
- Spannungsversorgung 110...230 VAC

Probenahmetisch/ Probenahmegefäße

- Probenahmetischgröße: 440x430 mm
- Probenahmegefäße: Vials – Glas mit Einstichmembran
- Verfügbare Volumen Vials: 20 ml - andere Größen auf Anfrage
- Anzahl der platzierbaren Vials bei Volumen 20 ml: 224 Stück
- Vials können vor den Probenahmen automatisch mit Inertgas gespült werden

Steuerung/ Ventiltechnik

- Parametrierbarer synchroner und asynchroner Probenahmeprozess
- Möglichkeit der Definition von Zeitplänen für den Probenahmeprozess
- Steuerung kann zusätzlich Ventile bedienen – damit ist das Ausschleusen einer Gasprobe aus einem Prozess möglich

Technologie pro Umwelt



● Weltweite Aktivitäten der UIT


www.uit-gmbh.de

Das Unternehmen gehört zur General Atomics Europe Gruppe
und ist Teil des weltweit tätigen Verbundes von General Atomics



Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden
Zum Windkanal 21
D-01109 Dresden
Deutschland

Telefon: +49 351 8864600
Fax: +49 351 8865774
info@uit-gmbh.de
www.uit-gmbh.de

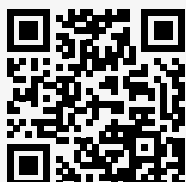

Die Informationen umfassen auch optionale Sonderausstattungen.
Der konkrete Lieferumfang wird jeweils mit dem Angebot definiert.

© Copyright 2020 Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden - V1 - Alle Rechte vorbehalten.